

Temporizador Traceable® de 4 canales




CONFIGURACIÓN INICIAL


- 1 Retire la tapa de las pilas para introducirlas.
- 2 Vuelva a colocar la tapa de las pilas.
- 3 Pulse el botón "ch/clock" (canal/reloj) hasta que aparezca el reloj en la fila superior de la pantalla.




- 4 Mantenga pulsado "ch/clock" (canal/reloj) hasta escuchar un pitido y la hora aparezca de manera intermitente.

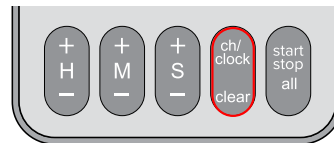

- 5 Para configurar la hora del reloj de 12 o 24 horas, pulse y mantenga pulsado el botón "start/stop all" (iniciar/detener todos).

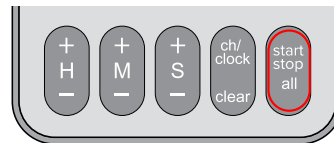


- 6 Utilice los botones H/M/S para configurar la hora.

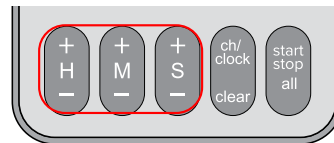

- 7 Al pulsar el botón de segundos se redondeará al minuto más cercano.
- 8 Pulse el botón "ch/clock" (canal/reloj) para salir de la configuración.


CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR

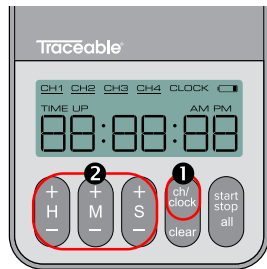

1. Pulse el botón “ch/clock” (canal/reloj) hasta que el canal deseado aparezca fijo (no intermitente) en la pantalla.
2. Utilice los botones H/M/S para configurar el temporizador.

Nota: Para borrar y empezar de nuevo, pulse el botón clear (borrar).

INICIO DEL TEMPORIZADOR

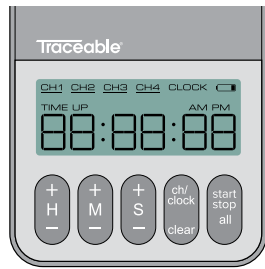

- Para iniciar o detener un temporizador individual, diríjase hasta ese canal de temporización utilizando el botón “ch/clock” (canal/reloj) y luego pulse “start/stop all” (iniciar/detener todos).
- Para iniciar o detener todos los temporizadores, pulse el botón “start/stop all” (iniciar/detener todos) en la pantalla del reloj.
- Los temporizadores que están en cuenta regresiva se mostrarán breve y rápidamente en la pantalla.
- Los temporizadores que están en cuenta progresiva se mostrarán breve y lentamente en la pantalla.
- Los temporizadores que hayan caducado se mostrarán breve y rápidamente.

GARANTÍA, SERVICIO O RECALIBRACIÓN

Traceable®

12554 Old Galveston Rd. Suite B230
Webster, Texas 77598 USA
Tel. 281-482-1714 • Fax 281-482-9448
support@traceable.com
traceable.com

Los productos Traceable® cuentan con la certificación de calidad ISO 9001:2015 otorgada por DNV y la acreditación ISO/IEC 17025:2017 como laboratorio de calibración otorgada por A2LA.

Artículo N.º 56000-16

Modelo N.º 5667

©2022 1065T9_M_92-5667-00 Rev. 1 07172025

Traceable®

Guía de inicio rápido del temporizador de 4 canales

