

Timer Traceable® a 4 canali



Tasto Start/Stop All


Tasto timer canale/
orologio annullan

Tasto dei secondi

Tasto dei minuti


Tasto delle ore

Batteria

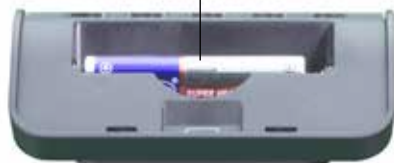

CONFIGURAZIONE INIZIALE

- 1 Rimuovere il coperchio del vano batterie e inserire le batterie.

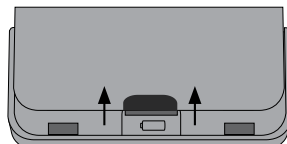


- 2 Sostituire il coperchio del vano batterie.


- 3 Premere il tasto ch/clock fino a quando non viene visualizzato l'orologio sulla riga superiore del display.




- 4 Tenere premuto ch/clock fino a quando non si sente un segnale acustico e l'ora non lampeggia.

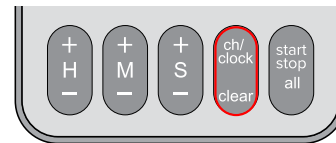

- 5 Per regolare l'orologio nel formato 12/24 ore, tenere premuto il tasto start/stop all.

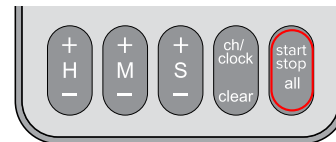


- 6 Utilizzare i tasti H/M/S per regolare l'ora.

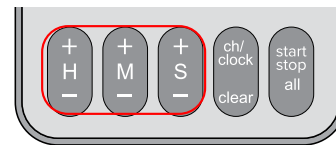

- 7 Premendo il tasto Secondi si arrotonda al minuto più vicino.

- 8 Premere il tasto ch/clock per uscire dalla configurazione.


IMPOSTAZIONE DI UN TIMER

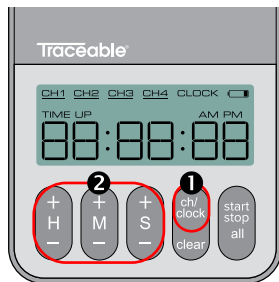

1. Premere il tasto ch/clock fino a quando il canale desiderato non appare fisso (non lampeggiante) sullo schermo.
2. Utilizzare i tasti H/M/S per configurare il timer.

Nota: Per cancellare e ricominciare, premere il tasto clear.

AVVIO DI UN TIMER

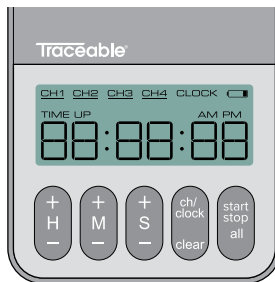

- Per avviare/arrestare un singolo timer, spostarsi su quel canale di temporizzazione utilizzando il tasto ch/clock e poi premere start/stop all.
- Per avviare/arrestare tutti i timer, premere il tasto start/stop all dalla schermata dell'orologio.
- I timer in fase di conto alla rovescia lampeggiano rapidamente.
- I timer avviati lampeggiano lentamente.
- I timer scaduti lampeggiano rapidamente.

GARANZIA, ASSISTENZA O RICALIBRAZIONE

Traceable®

12554 Old Galveston Rd. Suite B230
Webster, Texas 77598 USA
Ph. 281-482-1714 • Fax 281-482-9448
support@traceable.com
traceable.com

I prodotti Traceable® sono certificati di qualità
ISO 9001:2015 da DNV e accreditati ISO/IEC
17025:2017 come Laboratorio di calibrazione
da A2LA.

Articolo n. 56000-16

Modello n. 5667

©2022 1065T9_M_92-5667-00 Rev. 1 07172025

Traceable® Guida rapida al timer a 4 canali

