

## Traceable® Thermohygrometer mit Uhr

Temperatur

Feuchtigkeit

Uhr

Speicher auswählen

Speicher löschen

Batterieabdeckung


Integrierter Magnet

Integriertes Stativ




## ERSTEINRICHTUNG

- 1 Entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs und legen Sie die Batterien ein.

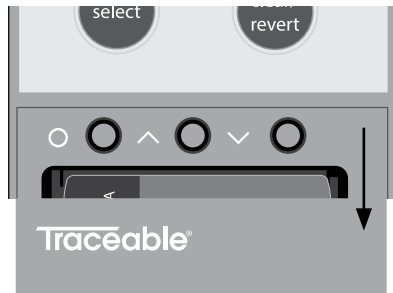

- 2 Sobald die Batterien eingesetzt sind, drücken Sie auf die Taste O, um die Einstellung auszuwählen.

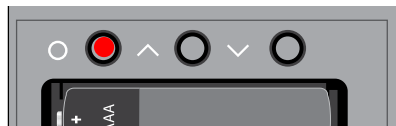


- 3 Die erste Einstellung, Stunden, blinkt im Display.



- 4 Drücken Sie die Tasten „^“ und „v“, um die Einstellung anzupassen.




- 5 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste O, um die Einstellung zu speichern und mit den Minuten, Stunden (im 12-/24-Stunden-Format) usw. fortzufahren.

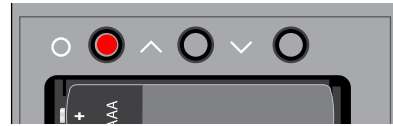


- 6 Vervollständigen Sie alle Einstellungen, um das Gerät zu konfigurieren:

- Stunden
- Minuten
- Uhr im 12- oder 24-Stunden-Format
- Temperatur-Einheiten

- 7 Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf.

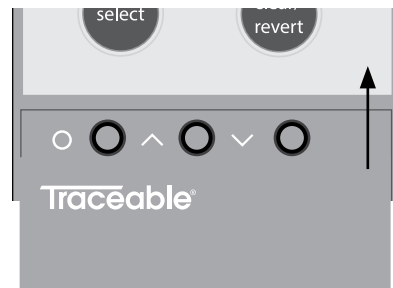

## DETAILS ANZEIGEN

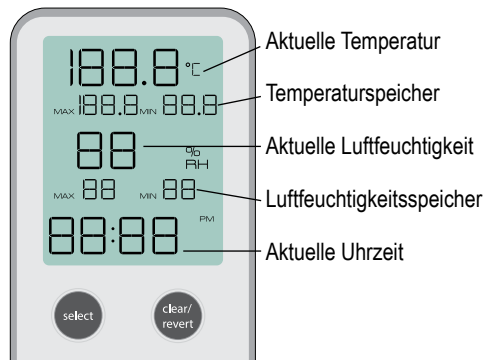

## LÖSCHUNG EINZELNER MESSWERTE

1. Drücken Sie die Taste „Select“ (Auswählen), bis der gewünschte zu löschende Messwert blinkt.
2. Halten Sie die Taste „Clear/Revert“ (Löschen/Rückgängig) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Messwert zu löschen.

## LÖSCHEN ALLER GESPEICHERTEN MESSWERTE

1. Halten Sie die Taste „Clear/Revert“ (Löschen/Rückgängig) 3 Sekunden lang gedrückt, um alle gespeicherten Messwert zu löschen.

## GARANTIE, WARTUNG ODER REKALIBRIERUNG

**Traceable®**

12554 Old Galveston Rd. Suite B230  
Webster, Texas 77598 USA  
T. 281-482-1714 • Fax 281-482-9448  
support@traceable.com  
traceable.com

Traceable® Produkte sind gemäß ISO 9001:2018  
qualitätszertifiziert durch DNV und gemäß ISO/IEC  
17025:2017 akkreditiert als Kalibrierungslabor durch A2LA.

Art.-Nr. 56000-10  
Modell-Nr. 5660  
©2022 1065T6\_M\_92-5660-00 Rev. 0 09022022

# Traceable® Thermohygrometer mit Uhr Schnellstart-Anleitung

