

Traceable® Digital-Kühl-/ Gefrierschrankthermometer

Alarmleiste
(optische Alarmanzeige)

Maximaler Speicher/Alarm
„hi“ (Hoch)

Aktueller Messwert

Minimaler Speicher/Alarm
„lo“ (Niedrig)

Batterieabdeckung

Speicher löschen
(zum Löschen des Min./Max.
Speichers)

Modus auswählen

Alarm stummschalten
(zum Stummschalten des
Alarmsummers)

Integrierter Magnet


Integriertes Stativ

Anschluss der Sonde




ERSTEINRICHTUNG

- 1 Entfernen Sie die Batterietür und legen Sie die Batterien ein.

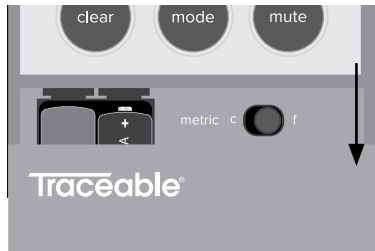

THERMOMETER KONFIGURIEREN

- 2 a. Stellen Sie die Temperaturmetrik und Abtastrate mit Schiebereglern ein.

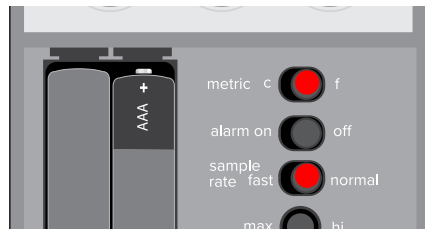

- b. Setzen Sie die Sonde (mitgeliefert) ein.



- 3 Stecken Sie eine Büroklammer in die Öffnung der Taste „Reset“ (Zurücksetzen), um die Einstellungen zu aktivieren.




ALARM KONFIGURIEREN

- 4 a. Drücken Sie die Taste „Mode“ (Modus), um den Alarmmodus aufzurufen.



- b. Stellen Sie die Alarmlimits mit den Tasten „hi“ (Hoch) und „lo“ (Niedrig) ein.

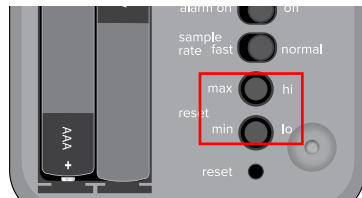


- c. Lassen Sie das Gerät auf Temperatur kommen.
d. Aktivieren Sie den Alarm mit dem Schieberegler.



ALARM-VERHALTEN:

- Der Summer kann mit der Taste „Mute“ (Stummschalten) stummgeschaltet werden.
- Der Alarmbalken stoppt nur, wenn er sich in Reichweite befindet oder der Alarm auf „Off“ (Aus) gestellt ist.
- Das entsprechende Alarmsymbol („hi“ (Hoch) oder „lo“ (Niedrig)) blinkt, bis der Alarm auf Aus gestellt wird.


NORMALER ANZEIGEMODUS

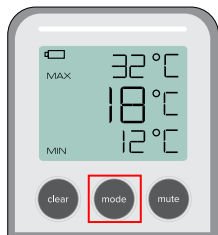

Drücken Sie, um den Modus zu wechseln.

ALARMANZEIGEMODUS

Einstellung
für hohen
Alarm

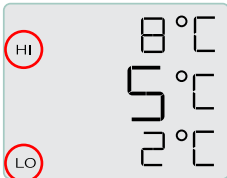

Einstellung
für niedrigen
Alarm


LO

ALARMLEISTEN-VERHALTEN:

- Wenn die gemessene Temperatur weniger als 1° von der Alarmeinstellung abweicht, blinkt die optische Alarmleiste orange.
- Wenn die gemessene Temperatur die

Alarmeinstellung erreicht oder überschreitet, blinkt die Alarmleiste rot und der Summer ertönt. Das Alarmsymbol („hi“ (Hoch) oder „lo“ (Niedrig)) blinkt.

- Wenn sich die Temperatur wieder normalisiert hat, werden die Alarmleiste und der Summer deaktiviert, aber das Alarmsymbol blinkt weiter, bis der Schieberegler auf „Off“ (Aus) gestellt wird.
- Das entsprechende Alarmsymbol blinkt, bis der Alarm-Schieberegler auf „Off“ (Aus) gestellt wird.

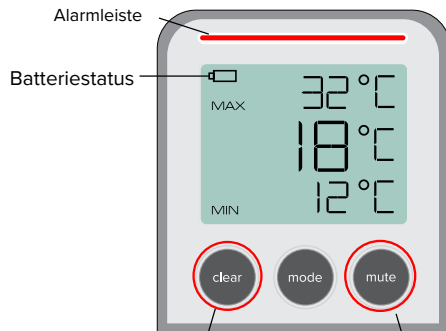

Drücken Sie, um den
Min./Max. Speicher zu
löschen.

Drücken Sie diese Taste,
um den Alarmsummer
stummzuschalten.

MELDUNGEN AUF DER ANZEIGE:

Pr - Die Sonde wurde entfernt.

Pi - Die Sonde wurde eingesetzt.

HH - Der obere Temperaturgrenzwert wurde überschritten.

LL - Der untere Temperaturgrenzwert wurde unterschritten.

GARANTIE, WARTUNG ODER REKALIBRIERUNG

Traceable®

12554 Old Galveston Rd. Suite B230

Webster, Texas 77598 USA

T. 281-482-1714 • Fax 281-482-9448

support@traceable.com

traceable.com

Traceable® Produkte sind gemäß ISO 9001:2018
qualitätszertifiziert durch DNV und gemäß ISO/IEC
17025:2017 akkreditiert als Kalibrierungslabor durch
A2LA.

Artikel-Nr. 56000-00, 56000-03, 56000-07

Modell-Nr. 5650, 5651, 5652

©2022 1065T7_M_92-5650-00 Rev. 0 09022022

Traceable®

Digital-Kühl-/Gefrier- schrankthermometer

Schnellstart-Anleitung

