


Termohigrómetro Traceable® con reloj




CONFIGURACIÓN INICIAL


- 1** Retire la tapa de las pilas para introducir las pilas.

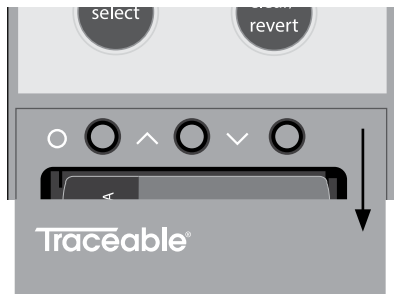

- 2** Una vez que las pilas estén instaladas, pulse el botón  para seleccionar el ajuste.

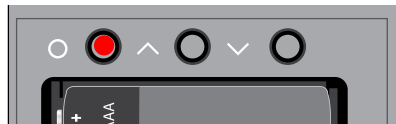


- 3** El primer ajuste (Horas) aparecerá en pantalla de manera intermitente.

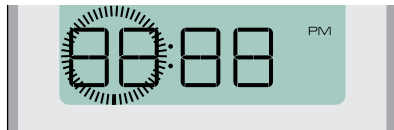

- 4** Pulse los botones "" y "" para ajustar la configuración.




- 5** Una vez que haya terminado, pulse el botón  para guardar la configuración y continuar con los ajustes de Minutos, 12/24 horas, etc.

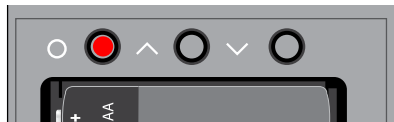


- 6** Complete todos los ajustes para configurar el dispositivo:
- Horas
 - Minutos
 - Reloj con formato de 12 o 24 horas
 - Unidades de temperatura

- 7** Vuelva a colocar la tapa de las pilas.

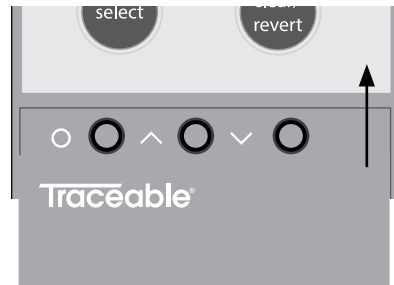

INFORMACIÓN DE LA PANTALLA

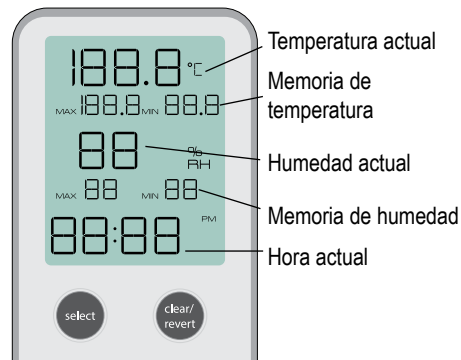

CÓMO BORRAR LAS LECTURAS INDIVIDUALES

1. Pulse el botón “select” (seleccionar) hasta que la lectura que desea borrar aparezca de manera intermitente.
2. Mantenga pulsado el botón “clear/revert” (borrar/revertir) durante 3 segundos para borrar la lectura.

CÓMO BORRAR TODAS LAS LECTURAS DE LA MEMORIA

1. Mantenga pulsado el botón “clear/revert” (borrar/revertir) durante 3 segundos para borrar todas las lecturas de la memoria.

GARANTÍA, SERVICIO O RECALIBRACIÓN

Traceable®

12554 Old Galveston Rd. Suite B230
Webster, Texas 77598 USA
T. 281-482-1714 • Fax 281-482-9448
support@traceable.com
traceable.com

Los productos Traceable® cuentan con la certificación de calidad ISO 9001:2015 otorgada por DNV y la acreditación ISO/IEC 17025:2017 como laboratorio de calibración otorgada por A2LA.

Artículo N.º 56000-10

Modelo N.º 5660

©2022 1065T6_M_92-5660-00 Rev. 1 07172025

Traceable®

Guía de inicio rápido del termohigrómetro con reloj

